

Magnetoterapia



Magner Plus

Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości. Wyposażony w dwa całkowicie niezależne kanały, pozwalające na jednoczesną terapię dwóch pacjentów z różnymi parametrami zabiegowymi.

Urządzenie wytwarza wszystkie podstawowe typy pola magnetycznego: sinusoidalny, trójkątny, prostokątny oraz ich wersje połówkowe. Ponadto użytkownik ma możliwość zestawienia kilku różnych typów pola w jeden ciąg, który będzie cyklicznie powtarzany przez ustalony czas zabiegu (tryb mieszany).

Pole magnetyczne wytwarzane jest przez sterownik w aplikatorach solenoidalnych o średnicach 20, 35 i 60 cm, dostosowanych do różnych obszarów ciała poddawanych terapii. Aplikator o średnicy 60 cm jest montowany na leżance. Dzięki zamontowaniu elementów jezdnych istnieje możliwość dowolnego ustawienia położenia aplikatora względem ciała pacjenta.

Dla aplikatorów o średnicach 20 i 35 cm opcjonalnie dostępny jest stół z dwiema półkami, których wysokości są optymalnie dobrane do terapii kończyn dolnych i górnych.

Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania do leżanki półki na sterownik.

SPECYFIKACJA

POLE MAGNETYCZNE


- kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
- emisja ciągła i impulsowa
- szeroki zakres częstotliwości
- tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej
- duża indukcja pola magnetycznego

TRYB MANUALNY

pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE

- uproszczona obsługa aparatu
- jednostki chorobowe wybierane po nazwie
- 80 wbudowanych programów zabiegowych
- 50 programów do ustawienia dla użytkowników

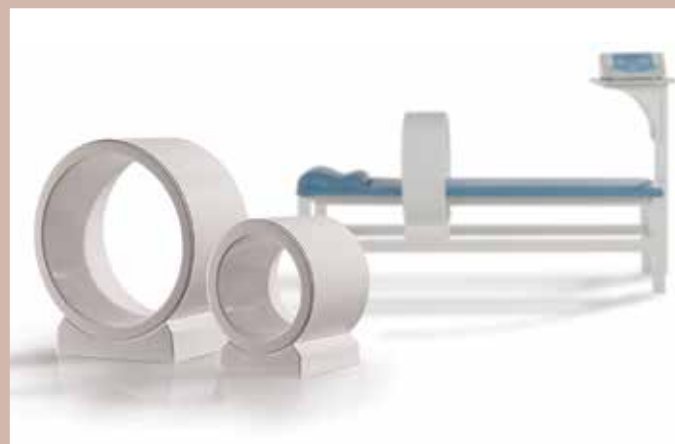

Magner Plus

Specyfikacja techniczna

ERGONOMIA

- tryb pracy: programowy/manualny
- wyświetlacz znakowy
- baza wbudowanych programów zabiegowych
- zegar zabiegowy
- dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne
- cztery uniwersalne gniazda aplikatorów
- automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora

KONSTRUKCJA

- ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy
- trwała i niezawodna klawiatura
- mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu
- autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i aplikatora

PARAMETRY TECHNICZNE

maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku

aplikator:	aplikator CSP 60	4,0 mT
	aplikator CSP 35	10,0 mT
	aplikator CSL 60	2,5 mT
	aplikator CSL 35	5,0 mT
	aplikator CSL 20	10,0 mT

parametry trybu impulsowego	impuls 1s/przerwa 0,5 – 8 s
zakres częstotliwości	2 – 60 Hz
zegar zabiegowy	1 – 30 min
zasilanie, pobór mocy	230 V, 50 Hz, 450 W
wymiary sterownika	35x47x16 cm
masa sterownika	13 kg

GWARANCJA

Magner Plus	2 lata
Aplikatory pola magnetycznego	2 lata

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przewód sieciowy
- instrukcja użytkowania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- aplikator pola magnetycznego CSP 60
- aplikator pola magnetycznego CSP 35
- aplikator pola magnetycznego CSL 60
- aplikator pola magnetycznego CSL 35
- aplikator pola magnetycznego CSL 20
- leżanka do magnetoterapii
- półka pod aparat do magnetoterapii mocowana do leżanki
- torba mieszcząca aparat
- stolik na aplikator 35 cm i 20 cm

